

## RespoSorb® Silicone

### Pansement hydrocellulaire avec interface siliconée

Référence	Taille ou dimensions	Codes EAN boîte
413041	8 x 8 cm	4052199603803
413042	12,5 x 12,5 cm	4052199604787
413043	10 x 20 cm	4052199613130
413044	20 x 20 cm	4052199604206
413045	20 x 25 cm	4052199604909



#### Produit

RespoSorb® Silicone est un pansement hydrocellulaire siliconé, stérile, à usage unique pour le traitement à long terme de plaies exsudatives et chroniques.

Les pansements RespoSorb® Silicone sont conformes aux exigences de la LPPR.

#### Indications / Classification


RespoSorb® Silicone est indiqué pour de nombreux types de plaies exsudatives : plaies aiguës (brûlures, plaies postopératoires, plaies traumatiques) et chroniques (ulcères, escarres, ulcère du pied diabétique, plaies tumorales).

Il peut être utilisé dans le cadre d'une thérapie de compression.

Il est utilisé chez l'adulte par les professionnels de santé, en milieu clinique ou à domicile, ou par des particuliers sous la supervision de professionnels de santé.

RespoSorb® Silicone est un dispositif médical de classe IIb (TUV-0123).

#### Spécifications

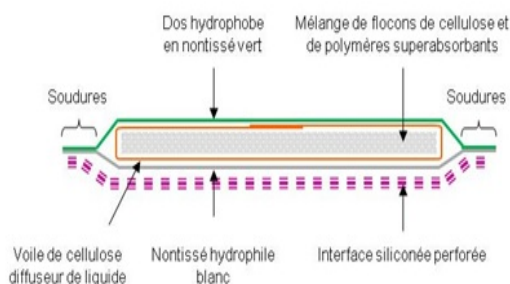

#### Composition :

- Une couche de contact avec la plaie en silicone perforé, qui facilite l'application du pansement et favorise la non-adhérence à la plaie.
- Un coussin absorbant, composé de cellulose et de polyacrylate superabsorbant (SAP) qui permet d'absorber et de retenir les exsudats, et qui est enveloppé dans un tissu de cellulose hydrophile destiné à distribuer le liquide dans le coussin absorbant.
- Un dos en non-tissé de couleur verte, en polypropylène, qui indique la face opposée à la plaie; il est hydrophobe mais perméable à l'air et permet les échanges gazeux.

#### Caractéristiques :

Capacité d'absorption : minimum 100 g/100cm<sup>2</sup> de coussin absorbant (norme NF EN 13726-1 chapitre 3.2)

Remboursé LPPR. Les pansements RespoSorb® Silicone sont pris en charge par la Sécurité Sociale dans la catégorie des pansements hydrocellulaires superabsorbants.

Référence	Taille ou dimensions produit	Caractéristiques spécifiques
413041	8 x 8 cm	Dimensions du pansement : 8 x 8 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 6,6 x 6,6 cm environ
413042	12,5 x 12,5 cm	Dimensions du pansement : 12,5 x 12,5 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 11,5 x 11,5 cm environ
413043	10 x 20 cm	Dimensions du pansement : 10 x 20 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 8,6 x 18,6 cm environ
413044	20 x 20 cm	Dimensions du pansement : 20 x 20 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 18,6 x 18,6 cm environ
413045	20 x 25 cm	Dimensions du pansement : 20 x 25 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 18,6 x 23,6 cm environ

Absence de latex\*  
Absence de phtalates\*  
Absence de colophane\*

\*(non ajouté intentionnellement).

## Présentation / Conditionnement

Unitaire sous pochette papier/film pelable.  
Conditionnement en boîte puis en carton.

Accompagné d'une notice d'emploi par boîte.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / blister	Nb blisters / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
<b>413041</b>	8 x 8 cm	1	10	6	128
<b>413042</b>	12,5 x 12,5 cm	1	10	6	80
<b>413043</b>	10 x 20 cm	1	10	6	64
<b>413044</b>	20 x 20 cm	1	10	6	32
<b>413045</b>	20 x 25 cm	1	10	6	32

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions blister	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
<b>413041</b>	8 x 8 cm	150 x 135 mm	141 x 68 x 160 mm	289 x 183 x 211 mm	1200 x 800 x 1847 mm
<b>413042</b>	12,5 x 12,5 cm	205 x 185 mm	191 x 68 x 215 mm	397 x 237 x 223 mm	1200 x 800 x 1934 mm
<b>413043</b>	10 x 20 cm	280 x 155 mm	161 x 68 x 290 mm	596 x 184 x 223 mm	1200 x 800 x 1943 mm
<b>413044</b>	20 x 20 cm	320 x 255 mm	261 x 68 x 330 mm	545 x 353 x 223 mm	1200 x 800 x 1934 mm
<b>413045</b>	20 x 25 cm	320 x 255 mm	261 x 68 x 330 mm	545 x 353 x 223 mm	1200 x 800 x 1934 mm

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité), à l'abri de la lumière directe du soleil.

## Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.

## Péremption

Durée de vie : 3 ans après la date de fabrication.

## Précautions d'emploi

Ne pas découper le pansement.

Avant tout traitement d'une plaie présentant des problèmes de cicatrisation, consulter impérativement un médecin qui établira un diagnostic clinique. Le traitement avec Resposorb® Silicone ne peut remplacer un traitement étiologique du retard de cicatrisation. En présence de signes cliniques d'infection, l'utilisation de ce pansement nécessite la maîtrise préalable de l'infection par un traitement approprié.

Dans tous les cas, suivre le protocole clinique instauré.

Il n'est pas recommandé de se tenir debout sur le pansement en cas de plaies aux pieds.

Pour plus d'informations, se référer à la notice d'emploi.

## Contre-indications

Ne pas utiliser Resposorb® Silicone si le patient présente une hypersensibilité à l'un de ses composants.