

## HydroClean® Advance Mini

### Pansement irrigo-absorbant



**Référence**    **Taille ou dimensions**    **Code EAN**  
**609609**    **Rond : diamètre 3 cm**    **4052199234311**

#### Produit

HydroClean® Advance Mini est un pansement hydroactif constitué principalement d'un polyacrylate superabsorbant (SAP) inclus dans des fibres de cellulose et activé (préhumidifié) par la solution de Ringer. Le coussinet est recouvert d'un tricot en polypropylène.

**Les pansements HydroClean® Advance Mini sont conformes aux exigences de la LPPR.**

#### Indications / Classification


HydroClean® Advance Mini est indiqué pour le soin en milieu humide des plaies sèches, légèrement et modérément exsudatives, et en particulier des plaies dont la cicatrisation est entravée. Ce produit est particulièrement indiqué pour le traitement des plaies chroniques et dont la cicatrisation est difficile lors de la phase de détersion et de granulation.

Le pansement doit être utilisé par des professionnels de santé ou par des personnes formées par des professionnels de santé.

HydroClean® Advance Mini est un dispositif médical de classe IIb (TÜV-0123).

#### Spécifications

##### Composition :

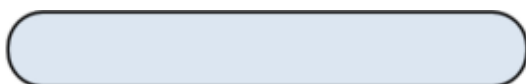

la partie centrale est constituée de particules superabsorbantes contenues dans des fibres de cellulose et activées (pré-humidifiées) par la solution de Ringer.

tricot hydrophobe en polypropylène

##### Caractéristiques :

HydroClean® Advance Mini libère la solution de Ringer dans la plaie jusqu'à trois jours. Pendant ce temps, l'irrigation interactive et continue de la plaie a lieu grâce au coussinet du pansement qui absorbe également l'exsudat de la plaie. Le SAP présent dans HydroClean® Advance Mini inactive les métalloprotéinases matricielles (MMP) qui altèrent la cicatrisation des plaies.

Remboursé LPPR.

Absence de latex\*  
Absence de phtalates\*  
Absence de colophane\*

\*(non ajouté intentionnellement).

## Présentation / Conditionnement / Conditions de stockage

Présentation individuelle sous pochette pelable aluminium stérile, puis en boîte.

Accompagné d'une notice d'emploi par boîte.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / pochette	Nb pochettes / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
609609	Rond : diamètre 3 cm	1	10	6	180

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions pochette	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
609609	Rond : diamètre 3 cm	120 x 90 x 5 mm	127 x 92 x 50 mm	295 x 142 x 120 mm	1200 x 800 x 1230 mm

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité).

## Stérilisation

A la vapeur.

## Péremption

Durée de vie : 3 ans.

## Précautions d'emploi

Ne pas découper.  
Consulter la notice d'emploi.

## Contre-indications

Ne pas utiliser HydroClean® Advance Mini sur des patients présentant une intolérance à l'un de ses composants.

## Conseils d'utilisation

Consulter la notice d'emploi.