

Action^{®2}
NG



Léger, confortable et robuste !



Yes, you can.

Le fauteuil **Action²_{NG}** a été développé à partir du fauteuil de référence : **Action³_{NG}**. Ses caractéristiques correspondent aux besoins des utilisateurs qui ne souhaitent pas faire de compromis entre sécurité et confort. Il utilise les mêmes modules et est totalement compatible avec **Action³_{NG}**, offrant ainsi un poids léger pour faciliter manipulation et maniabilité. **Action²_{NG}** s'intègre parfaitement à la famille **Action**.

Le design des potences à 80° apporte plus de stabilité aux membres inférieurs de l'utilisateur.

Léger et confortable

Avec un poids de 16,7 kg et un châssis pliant par croisillon, **Invacare Action²_{NG}** est très facile à manipuler et à transporter. Grâce à ses compatibilités avec la famille **Action**, il peut être adapté aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

Robustesse

Grâce à son croisillon profilé le fauteuil profite d'une robustesse qui lui assure une grande longévité. Il ne vous décevra pas et vous suivra partout !



Caractéristiques



Nouvelle configuration

NOUVEAU

Cette nouvelle version dispose désormais de supports de fourches réglables en angle ainsi que de nouvelles platines de roues arrière permettant le déplacement sur au moins 4 positions verticales.

Invacare Action²_{NG} Transit

Ce fauteuil est équipé d'un dossier inclinable par crémaillères et d'un système de freins manuels tierce-personne au pied inédit. Très compact avec une largeur HT = largeur d'assise + 145 mm.

2 types de dossiers

fixe ou inclinable par crémaillère (pour plus de confort).

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Hauteur d'assise	Hauteur du dossier	Hauteur des accoudoirs	UL	Pente d'assise	Angle de dossier
Invacare Action ² _{NG}	405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	400 - 425 mm	435 / 460 / 485 / 510 mm*	430 mm	240 mm	330 - 460 mm	0° / 3° / 6°	0° / 10° / 20° / 30° ou 7°
Invacare Action ² _{NG} Transit	405 / 430 / 455 / 480 mm	400 - 425 mm	485 mm	430 mm	240 mm	330 - 460 mm	3°	0° / 10° / 20° / 30°


	Largeur hors-tout	Hauteur hors-tout	Longueur hors-tout sans potence	Largeur pliée hors-tout	Poids du fauteuil	Poids max. utilisateur
Invacare Action ² _{NG}	Largeur d'assise + 200 mm	920 / 945 mm	820 - 870 mm	325 mm	16,7 kg	125 kg
Invacare Action ² _{NG} Transit	Largeur d'assise + 145 mm	945 mm	725 mm	240 mm	14,9 kg	125 kg



* Pour atteindre la hauteur d'assise avant de 510 mm, cela nécessite le changement des fourches et des roues avant.

Coloris du châssis

Gris Argent

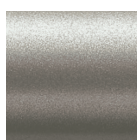

Revêtement du siège

Nylon noir

