


## HydroTac® Sacral

### Pansement hydrocellulaire

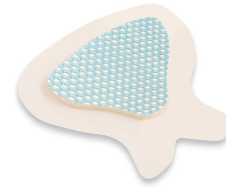

Référence	Taille ou dimensions	Code ACL
685827	18 x 18 cm (Boîte de 10)	9629774
685850	22 x 22 cm (Boîte de 10)	6009578

#### Produit

HydroTac® sacral est un pansement hydrocellulaire recouvert sur la face externe d'un film en polyuréthane qui permet les échanges gazeux tout en restant imperméable aux liquides et aux bactéries, revêtu d'une couche d'hydrogel. Le gel est constitué d'un polymère hybride polyurée-polyuréthane aqueux contenant du propylène glycol. HydroTac® sacral comporte une bordure autoadhésive recouverte d'un adhésif polyacrylate.

#### Indications / Classification

HydroTac® sacral est particulièrement indiqué pour le soin des plaies durant la phase de granulation et la phase d'épithélialisation légèrement à modérément exsudatives. HydroTac® sacral est destiné à être appliqué par des spécialistes du traitement des plaies. Les spécialistes du traitement des plaies peuvent déléguer le changement des pansements aux patients et/ou à leurs proches (non-professionnels) sous la supervision de professionnels.

HydroTac® Sacral est un dispositif médical de classe IIb (TÜV-0123).

#### Spécifications

##### Composition :

HydroTac® Sacral est composé comme ci-dessous :

- un film élastique et perméable à la vapeur d'eau, en polyuréthane et un adhésif en acrylique
- une mousse douce et absorbante en polyuréthane
- un gel en contact avec la plaie en polymère de polyurée/polyuréthane contenant du propylène glycol
- un feuillet protecteur siliconé avec numérotation (3 à 4)

##### Caractéristiques :

Capacité d'absorption : > 0,4 g/cm<sup>2</sup>

Force d'adhésivité : > 2 N/25 mm.

Pénétration à la vapeur d'eau (ou taux de perméabilité) : > ou = 1000 g/m<sup>2</sup>/24 h

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimension du coussinet
685827	18 x 18 cm (Boîte de 10)	13 x 10,6 cm
685850	22 x 22 cm (Boîte de 10)	16 x 13,6 cm

Remboursé LPPR.

Absence de latex.

Absence de phtalates.

Absence de colophane.

#### Présentation / Conditionnement

Emballé individuellement sous pochette aluminium pelable.

Accompagné d'une notice d'emploi par boîte.



Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / pochette	Nb pochettes / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
685827	18 x 18 cm (Boîte de 10)	1	10	6	32
685850	22 x 22 cm (Boîte de 10)	1	10	3	64

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions pochette	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
685827	18 x 18 cm (Boîte de 10)	277 x 255 mm	263 x 66 x 284 mm	538 x 298 x 216 mm	1200 x 800 x 1878 mm
685850	22 x 22 cm (Boîte de 10)	294 x 275 mm	281 x 66 x 304 mm	338 x 296 x 216 mm	1200 x 800 x 1878 mm

## Stérilisation

Par rayonnement.  
Durée de vie : 3 ans.

## Précautions d'emploi

Voir la notice.

## Contre-indications

Ne pas utiliser HydroTac ® sacral chez les patients présentant une intolérance à l'un des composants, en particulier aux adhésifs à base de propylène glycol, de polyuréthane ou d'acrylique.